


#4071 Bild hinzufügen: Datei-Vorschau beim Dialog "Ordner wählen"

Um Bilder 2D/3D aus einem Ordner nach OnyxCeph³™ zu importieren, muss dieser Ordner im Modul Bild hinzufügen über die entsprechende Icon-Taste im Panel Quelle ausgewählt werden. Der zugehörige Explorer-Auswahldialog zeigt nur die Ordner an und nicht, wie vom Explorerfenster erwartet, deren Inhalt.

Um den Inhalt in einem separaten Fenster anzuzeigen, kann über Icon-Menü die Option [Verzeichnis anzeigen] aktiviert werden.

Alternativ kann mit Option [Alternativer Verzeichnisdialo] der *klassische* Ordner-Auswahldialog angezeigt werden, sofern von der verwendeten Windows™-Version noch unterstützt.

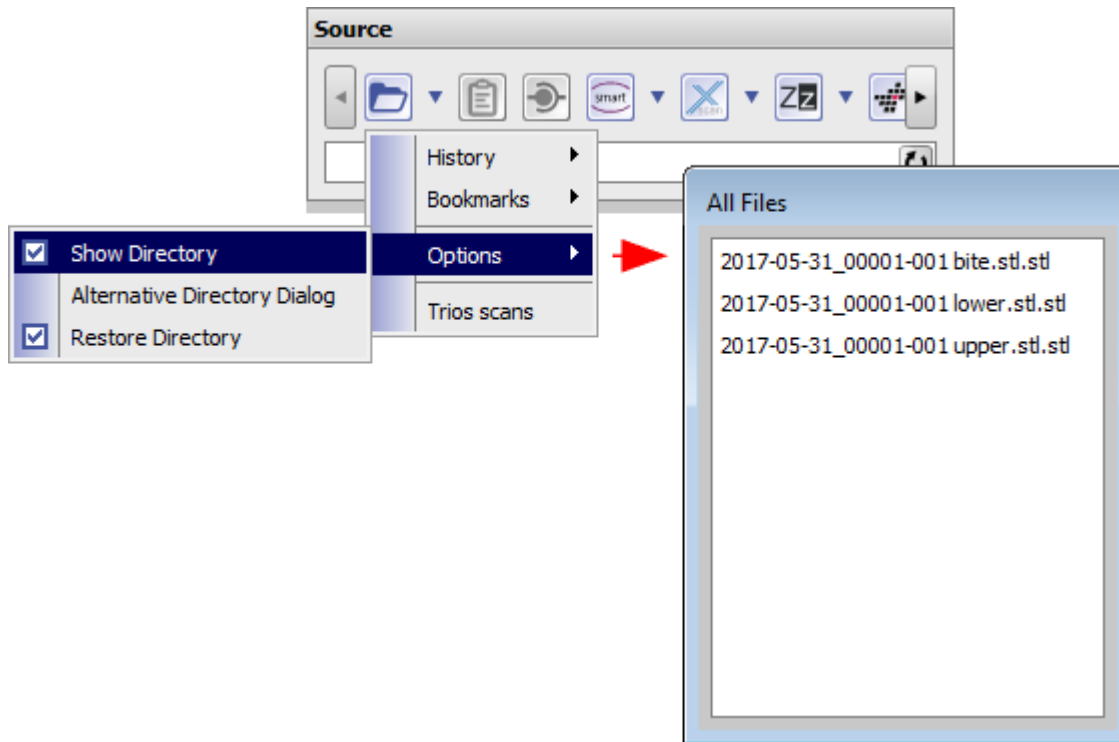

From:
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<https://onyxwiki.net/doku.php?id=4071>

Last update: 2017/06/13 14:58

