

Modul Bild hinzufügen 2D



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit					


nicht
 enthalten
 immer
 enthalten
 optional
 enthalten

In Modul Bild hinzufügen 2D können 2D Datensätze von verschiedenen Quellen importiert, [Sitzungen](#) und [Bildtypen](#) zugeordnet, datiert, mit [Bildattributen](#) und [Bildkommentaren](#) versehen und in der Onyx-Datenbank gespeichert werden. Bilder können einzeln oder im Block eingelesen und mittels Option QR-Code automatisch den zutreffenden Patienten zugeordnet werden.

Erste Schritte

1. Quelle wählen
2. Zum neuen Befund gehörige Dateien gemeinsam in eine Sitzung ziehen
3. Bildtyp wählen und auf den neuen Befund ziehen
4. Befund zum Ausrichten doppelklicken
5. Änderungen speichern

Moduloberfläche

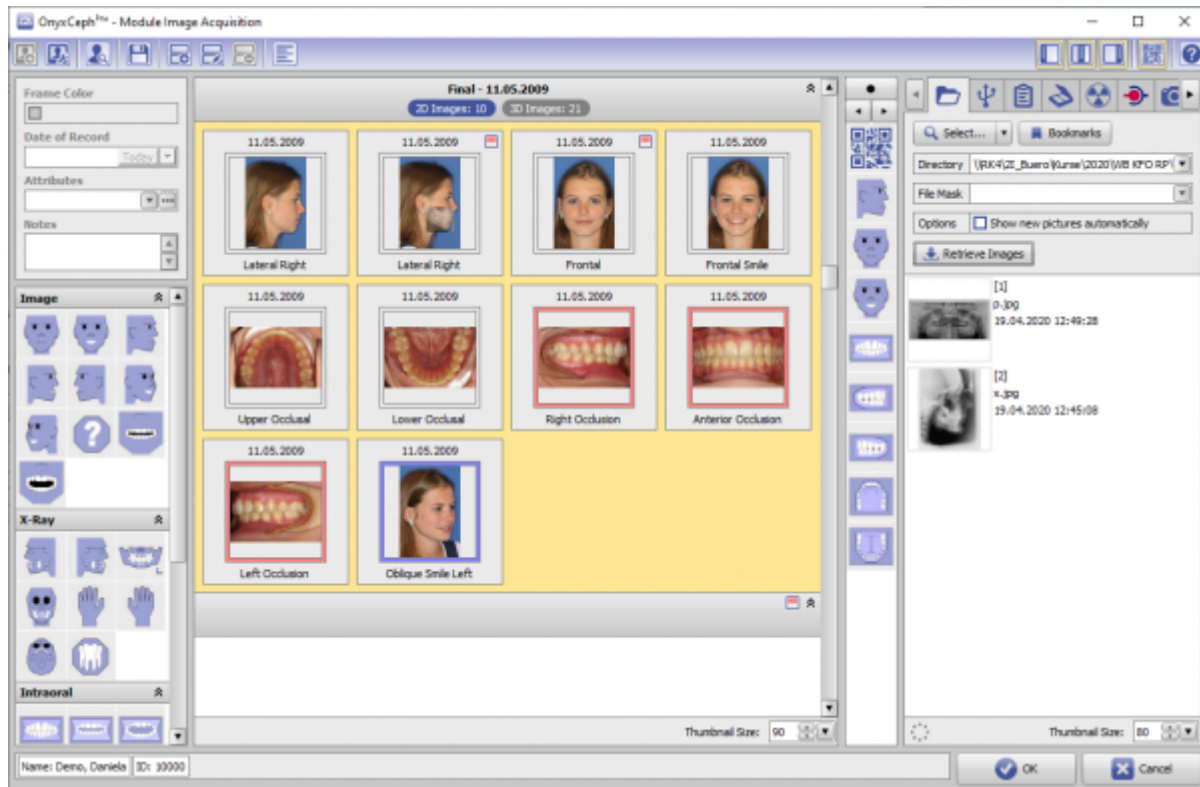

Verweise



Modul-Handout Bildimport 2D

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=add_image_2d

Last update: **2023/03/06 12:51**

