


# Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: Sidexis

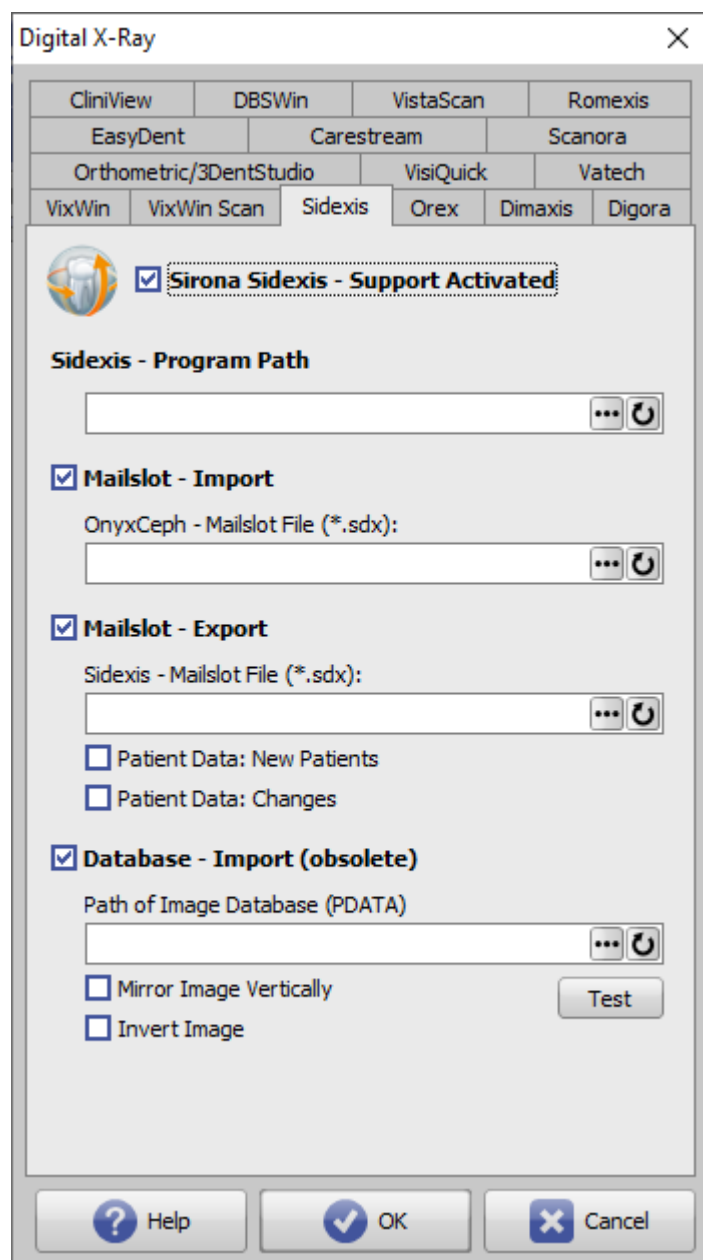

## Sirona Sidexis - Unterstützung aktiv

Aktivierung der Icon-Taste [Digitalröntgen] im Modul [Bild hinzufügen 2D](#).

## Sidexis Programmpfad


Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei `..\Sidexis(4).exe`

Der Programmpfad muss nur konfiguriert werden, wenn Sidexis über [Gehe zu] direkt aus OnyxCeph<sup>3</sup>™ heraus aufgerufen werden soll.


## Mailslot-Import

Pfad der OnyxCeph-Briefkastendatei, der in den Sidexis-Einstellungen unter Kommunikationspartner eingetragen wurde.

### Einstellungen Kommunikationspartner in Sidexis

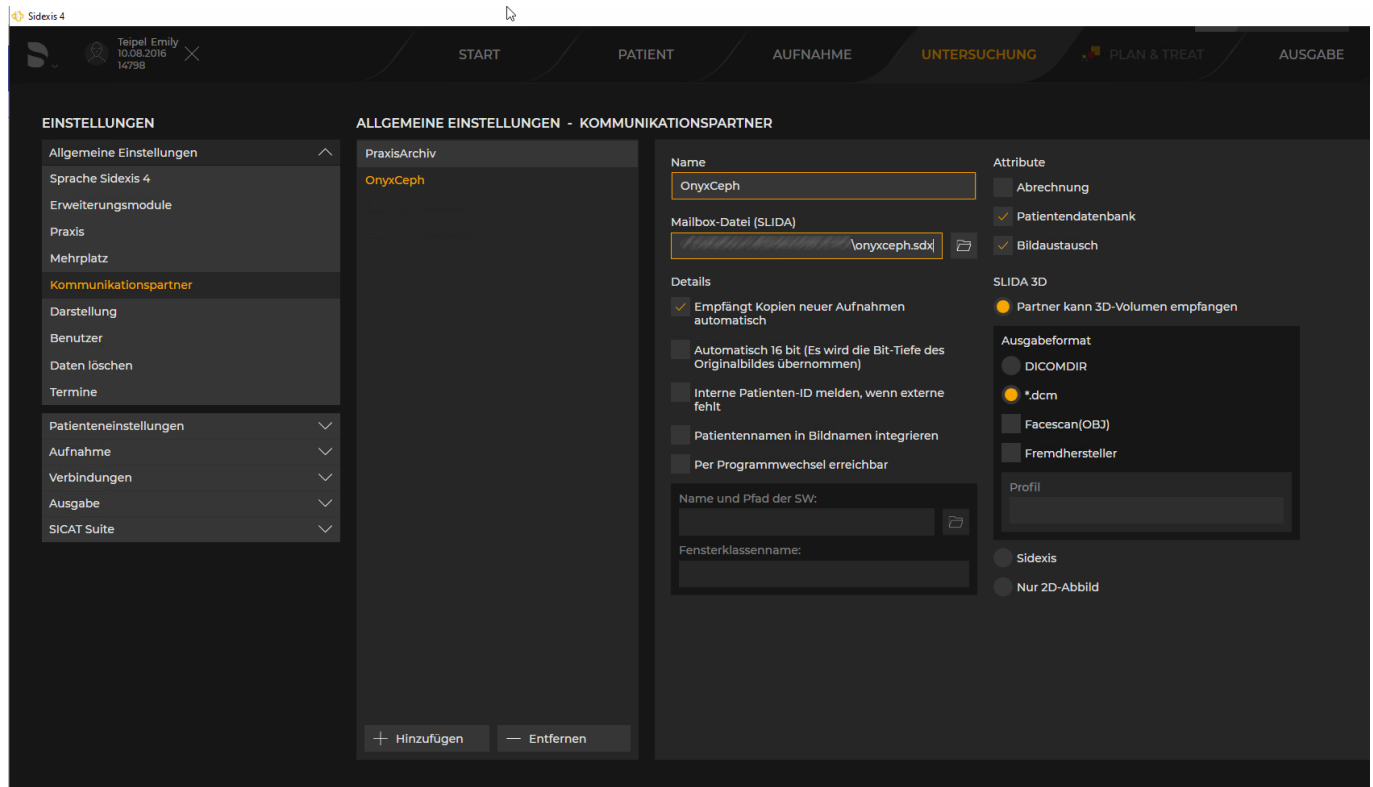


Die Checkbox [Empfängt Kopien neue Aufnahmen automatisch] sichert ab, dass neu aufgenommene Bilder automatisch in den Mailslot übernommen und somit im Modul [Bild hinzufügen 2D](#) in OnyxCeph<sup>3</sup>™ sofort angezeigt werden. Alternativ können Bilder in Sidexis manuell dem Mailslot hinzugefügt werden.

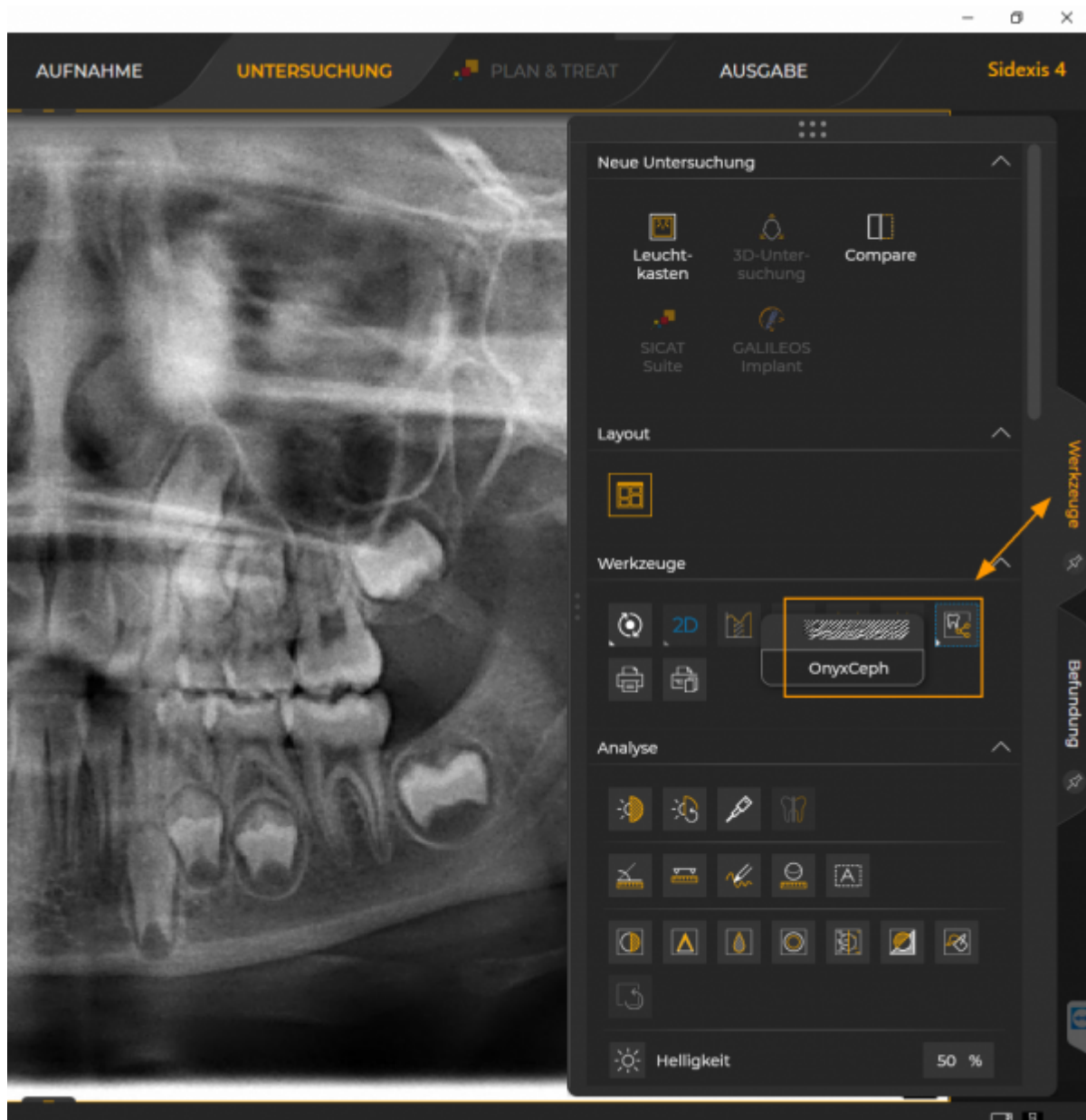

## Mailslot-Export

Pfad der SLIDA-Briefkastendatei, der in den Sidexis-Einstellungen unter Kommunikationspartner eingetragen wurde.

[Einstellungen Mehrplatz in Sidexis](#)

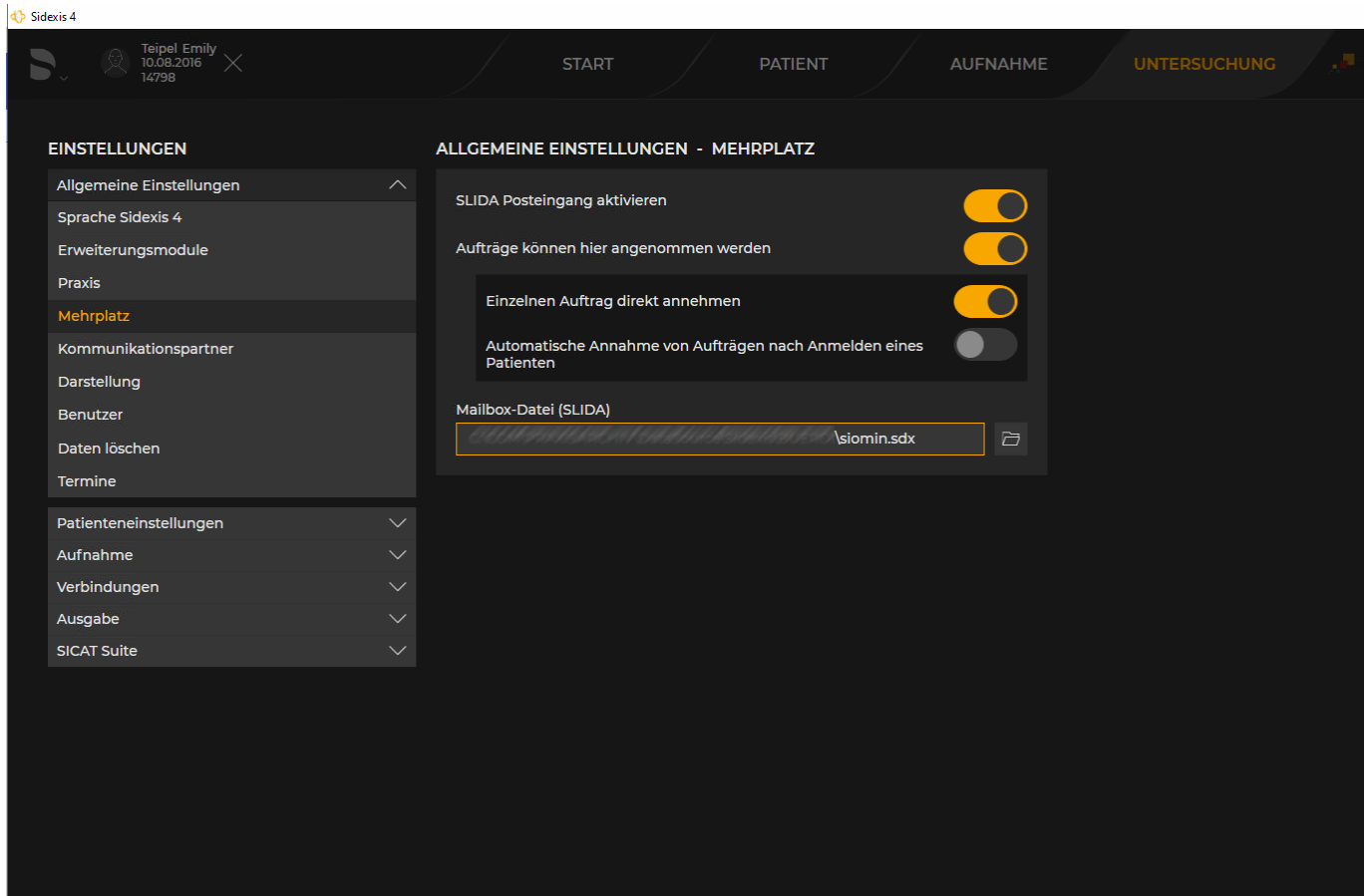

Der Eintrag ist nur erforderlich, wenn das Sidexis-Programm aus OnyxCeph<sup>3</sup>™ heraus aufgerufen werden soll. Optional kann vorgegeben werden, ob noch nicht vorhandene Patienten angelegt bzw. abweichende Patientendaten abgeglichen werden sollen.

## Datenbank-Import (vormal's)

Pfad der Sidexis-Bilddatenbank PDATA. Der Eintrag ist nur erforderlich, wenn die Bilddatenbank direkt ausgelesen werden soll. Diese Option erfordert ggfls. die Installation zusätzlicher Datenbanktreiber und wird ab Sidexis 4.4 aus datenschutzgründen nicht mehr unterstützt.

Optional kann vorgegeben werden, ob die Datenbankbilder vertikal gespiegelt und/oder invertiert werden sollen.

*Hinweis:* Die in der Bilddatenbank abgelegten Rohbilder beinhalten (anders als bei mailslot-Übergabe)) keine in der Sidexis-Anwendung angewandten Bildbearbeitungsschritte oder Konvertierungen.

From:

<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

<https://onyxwiki.net/doku.php?id=sidexis>

Last update: **2023/12/21 11:59**

