



# Einfacher 3D-Modellexport in Okklusion

## Schritte

- (1) Wählen Sie den zu exportierenden Datensatz in der Thumbnail-Übersicht aus
- (2) Öffnen Sie mit Rechtsklick das Thumbnail-Kontextmenü

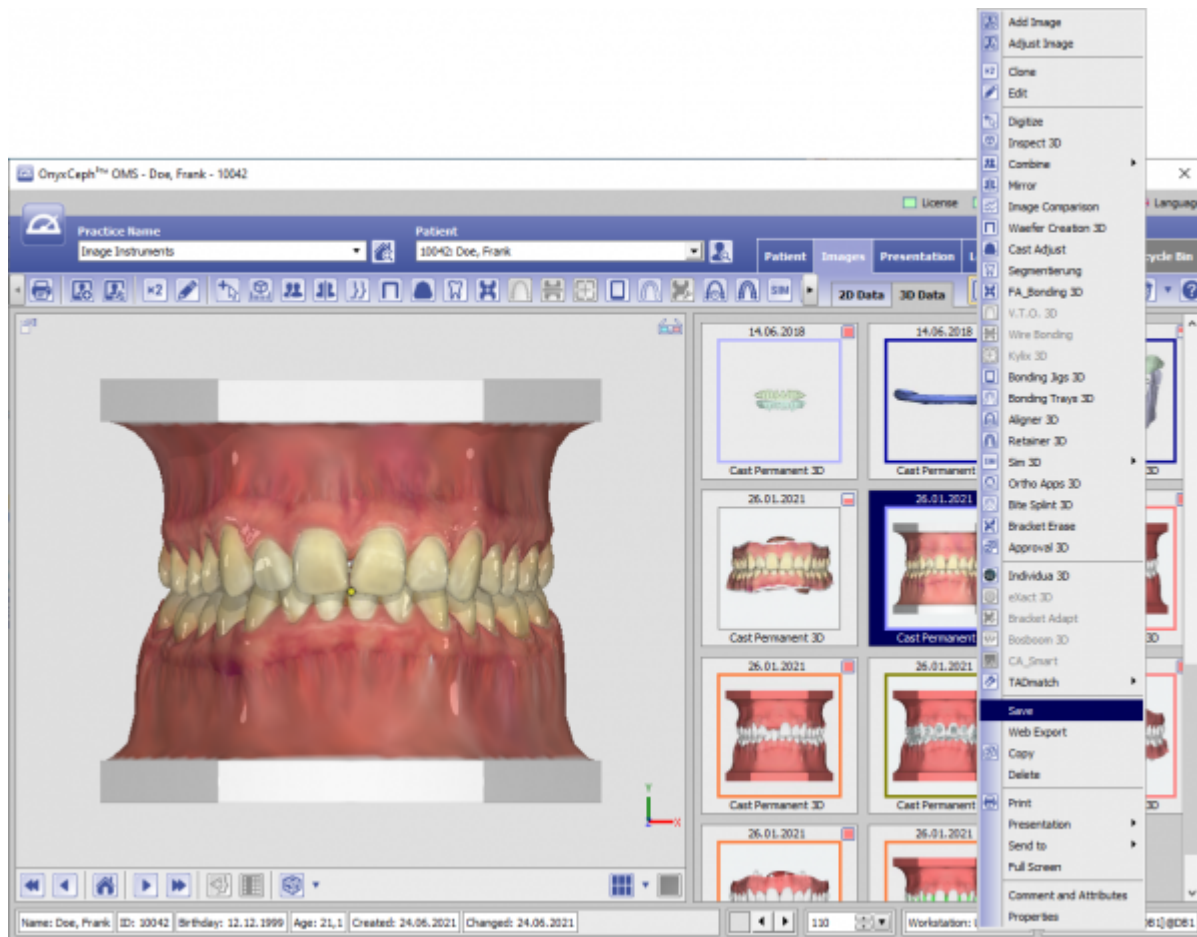

- (3) Wählen Sie Eintrag [Speichern]

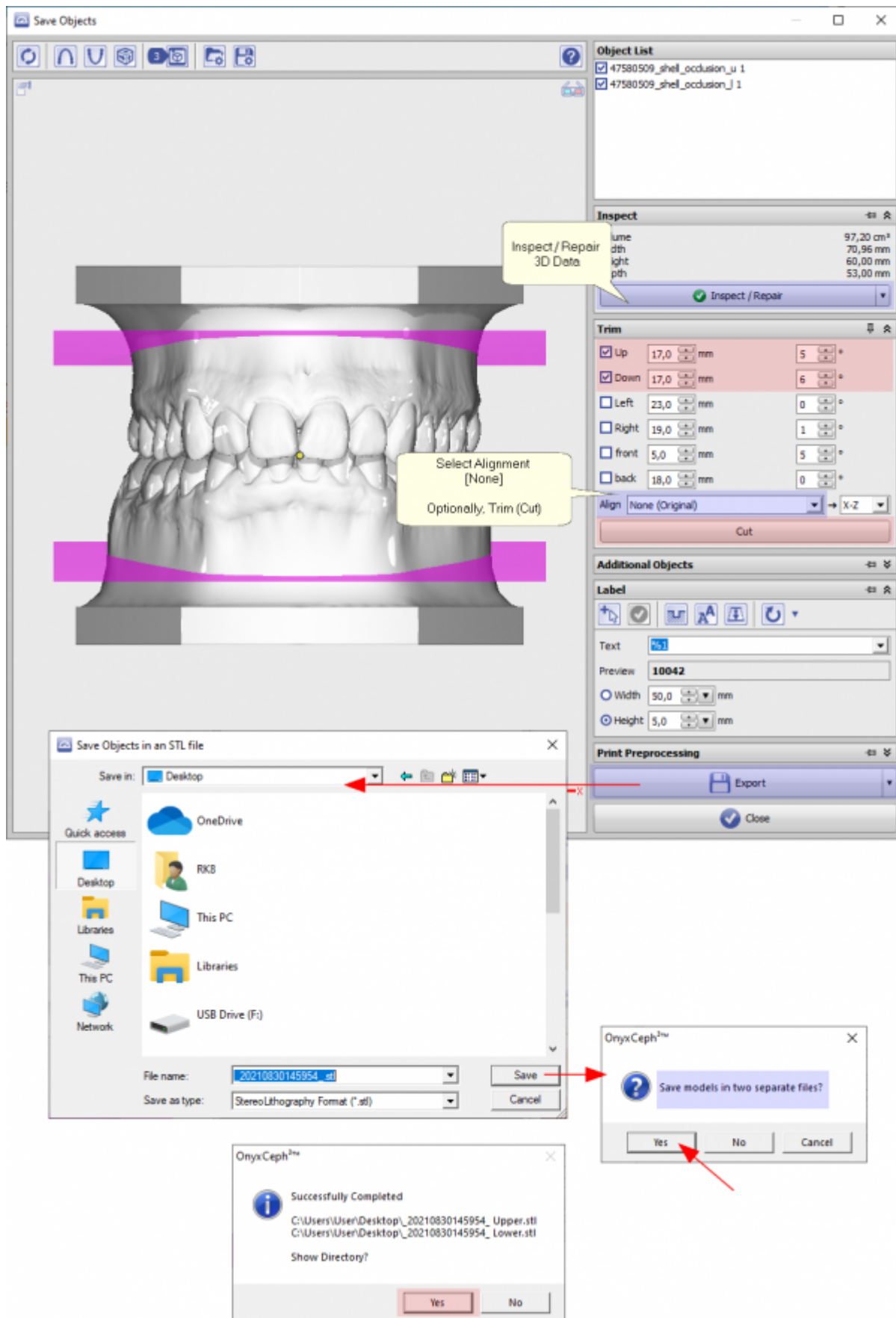

(4) Prüfen/reparieren Sie den Datensatz im Hinblick auf Netzfehler

(5) *Optional:* Definieren und benutzen Sie Schnittebenen

(6) Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung von OK und UK nicht geändert wird, um die Okklusion zu erhalten

(7) *Optional:* beschriften Sie Oberkiefer und/oder Unterkiefer

(8) Exportieren Sie den Datensatz in ein ausgewähltes Verzeichnis

(9) *Optional*: Öffnen Sie nach dem Speichern das Export-Verzeichnis im Explorer

---

## Verweise

 [Workflow 3D Export \(ausführlich\)](#)

From:

<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

<https://onyxwiki.net/doku.php?id=simple3dexport>

Last update: **2021/08/30 16:42**

