

Systemoptionen - Tab |Daten hochladen / Container|

Auf Systemoptionen-Reiter |Daten hochladen| erfolgen alle Einstellungen für die Kommunikation mit Webservern über FTP- und HTTP-Protokoll zum Hoch- bzw. Herunterladen von [Container](#)-, Report- und [Webviewer](#)-Dateien.

System Options

Patient Data

Image Types

Sessions

Galleries

Printouts

Forms

Display

Interfaces

Third Party Tools

Event

Upload Data

Email

Container | Report | Import | 3D-Web-Viewer

Host:

Connection Security:

User Name:

User Password:

Host Directory:

Passive Mode: ☒

Download - Protocol / Data Address:

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

Einstellungen Upload-Serververbindung

Eintrag	Beschreibung	Beispiel
Host	Ihr Dienstleister für den FTP-Speichersplatz	123.456.789.012
Verbindungssicherheit	Protokoll für den Upload	FTPS
Benutzername	Der für den FTP-Zugriff eingerichtete Account-Name	onyxUser
Benutzerpasswort	Das zum Benutzer passende Passwort für den FTP-Zugriff	••••
Host Verzeichnis	Das Verzeichnis der Daten relativ zum Root-Verzeichnis des Benutzers	container
Passiv Mode	Passiver Übertragungsmodus	✓


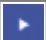

Automatisches Löschen

Um die Datenmenge auf dem Server zu begrenzen, kann eine maximale Verweilzeit der hochgeladenen Dateien in Tagen festgelegt werden. Diese Einstellung setzt voraus, dass der Server eine solche Option zulässt.

Download - Protokoll / Daten Adresse

Protokoll (FTP | http: | https:) und Webadresse (URL) für das Herunterladen der von dem oben in Sektion 1 eingerichteten Serververzeichnis.

Verweise

	Container-Exchange
	Workflow Container Export
	Workflow Container Import

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab_uploaddata&rev=1650977767

Last update: **2022/04/26 14:56**

