



Bilder via Webcam importieren

Eine einfache Möglichkeit, Kamerabilder zu importieren, die mit einer integrierten oder über USB angeschlossenen Webcam aufgenommen wurden, kann in Systemoptionen auf Reiter [\[Externe Programme\]](#) eingerichtet und genutzt werden.


Hierzu unter Eintrag [3. Start] den Aufruf der Webcam-Applikation (z.B. [microsoft.windows.camera:] für die Windows™-integrierte Kamera-App) und unter Eintrag [Bildimport-Lesezeichen] den von der Anwendung für das Speichern der aufgenommenen Bilder verwendeten Zielordner eintragen (z.B. [C:\Users\Image Instruments\Pictures\Camera Roll] für die Windows™-integrierte Kamera-App).

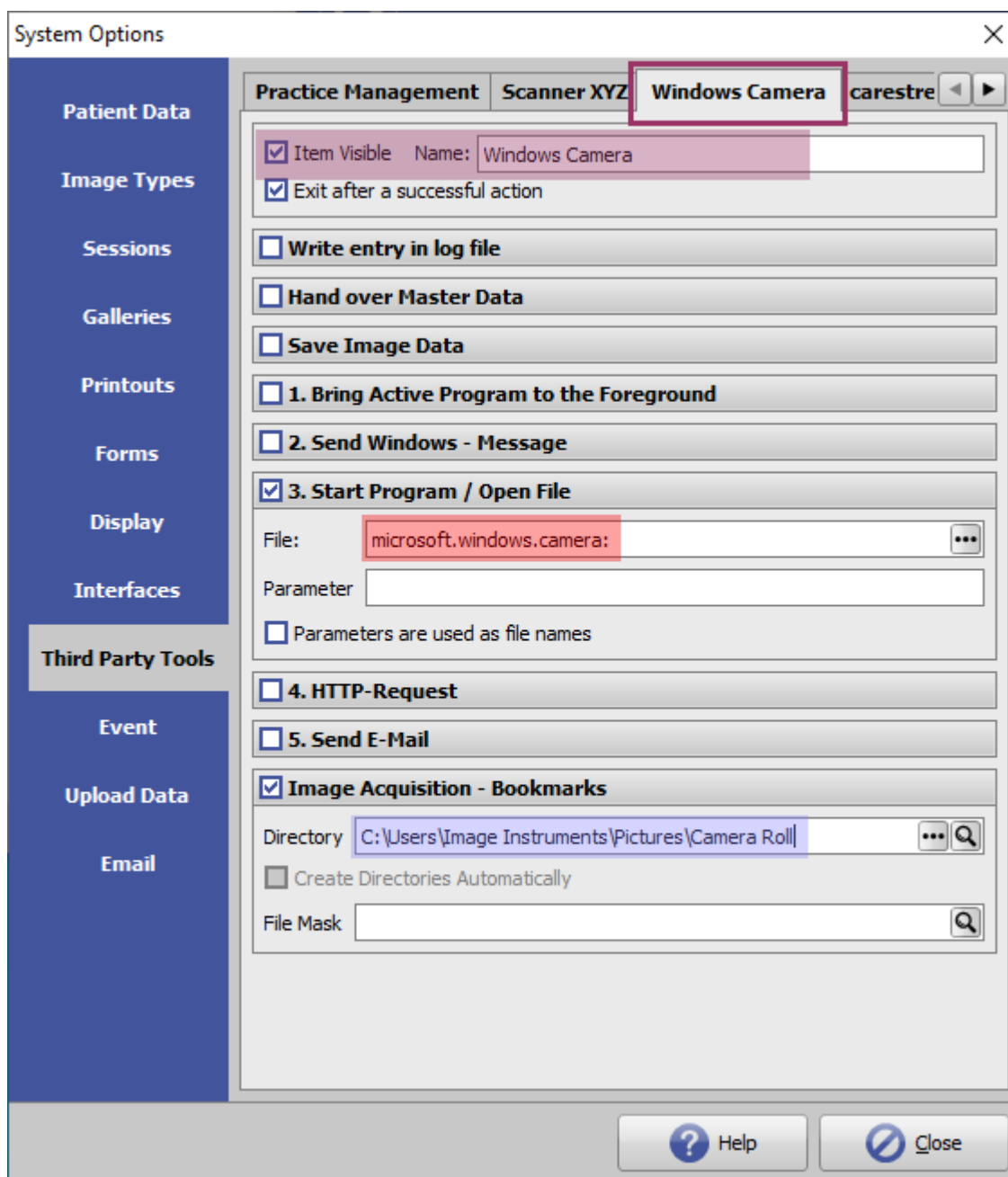

Dann kann die Bildaufnahme über die Kamera über Menü [\[Gehe zu ►\]](#)

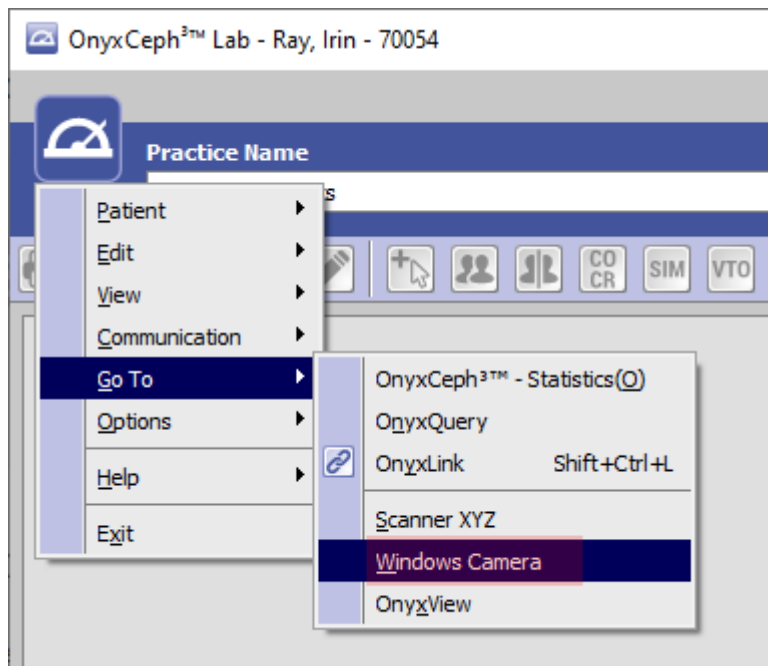

und der Import der aufgenommenen Bilder im Modul [add_image_2D|Bild hinzufügen 2D] über das angelegte Lesezeichen erfolgen.

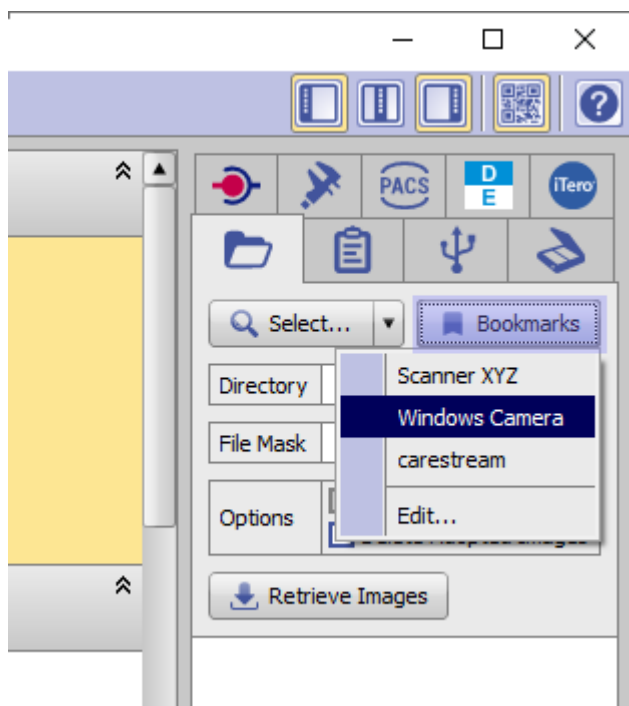

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=webcam_import

Last update: 2023/08/25 10:06

