


3D Daten an Dreve senden

Ab Release 3.2.67 (149) unterstützt die kieferorthopädische Bildverarbeitungssoftware OnyxCeph³™ das Versenden von Herstellungsaufträgen für dentale Modelle und andere kieferorthopädische Geräte zur Fertigung mittels generativer Verfahren an die Firma Dreve GmbH www.dreve.de unmittelbar aus dem Exportdialog der Software heraus. Finden Sie nachfolgend eine kurze Anleitung.

Voreinstellungen

Am OnyxCeph³™ - Arbeitsplatz öffnen Sie im Menü Systemoptionen auf Reiter [Schnittstellen](#) mit Taste [3D Druck] den Einstellungsdialog.


Hier wählen Sie ein temporäres Exportverzeichnis für das lokale Zwischenspeichern der hochzuladenden Datensätze, bestätigen oder ergänzen Ihre Dreve-Kundendaten und aktivieren die Exportoption mit Checkbox.

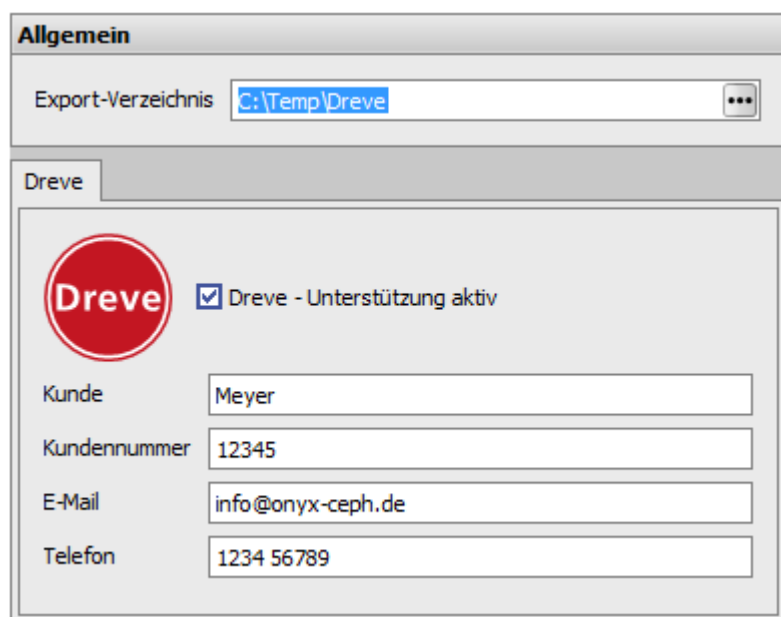

Allgemein

Export-Verzeichnis

Dreve

 ☒ Dreve - Unterstützung aktiv

Kunde


Kundennummer

E-Mail

Telefon


Export

Das Exportfenster für 3D-Objekte kann in allen OnyxCeph³™ 3D-Modulen über Icon-Taste oder im Kontextmenü der Objektliste geöffnet werden. Im Exportfenster aktivieren Sie das zu fertigende Einzelobjekt (z.B. Unterkiefer), wenden optionale Exportoptionen an (Beschneiden, Ausblocken, Beschriften, Neuvernetzen) und klicken im Anschluss auf Taste [Export]. Dort wählen Sie den Eintrag Dienstleister|Dreve, um das Teilobjekt der Auftragsliste hinzuzufügen. Wiederholen Sie den Vorgang für alle zur Fertigung vorgesehenen Einzelobjekte.

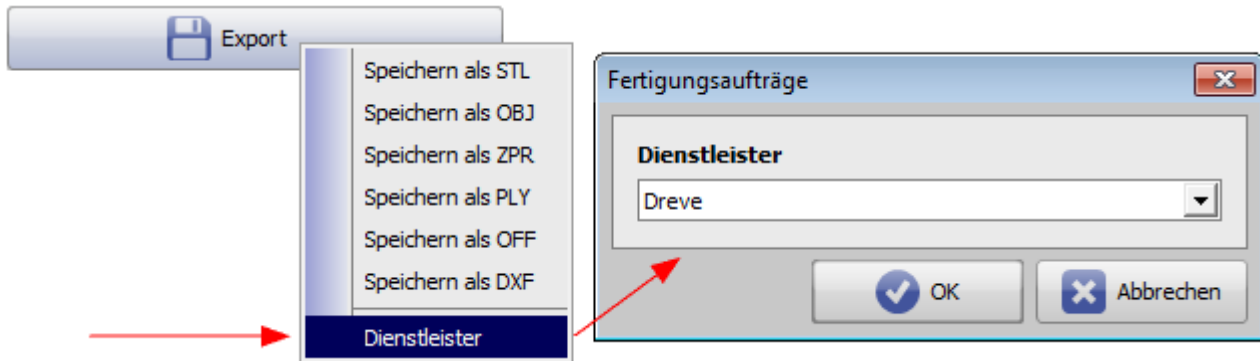

Versenden

Über die Icon-Taste Fertigungsaufträge können Sie die Auftragsliste mit Details zu den darin enthaltenen Einträgen anzeigen und diese einzeln versenden oder auch wieder aus der Liste entfernen. Mit der Taste [Absenden] wird der jeweilige Einzelauftrag direkt auf den FTP-Server der Firma Dreve geladen. Gleichzeitig wird eine Kopie der Auftrags-Email an die von Ihnen im Einstellungsdialog hinterlegte Email-Adresse gesendet. Der Status des Upload-Vorganges wird durch eine gelbe bzw. grüne Hintergrundfarbe in der Auftragsliste markiert.

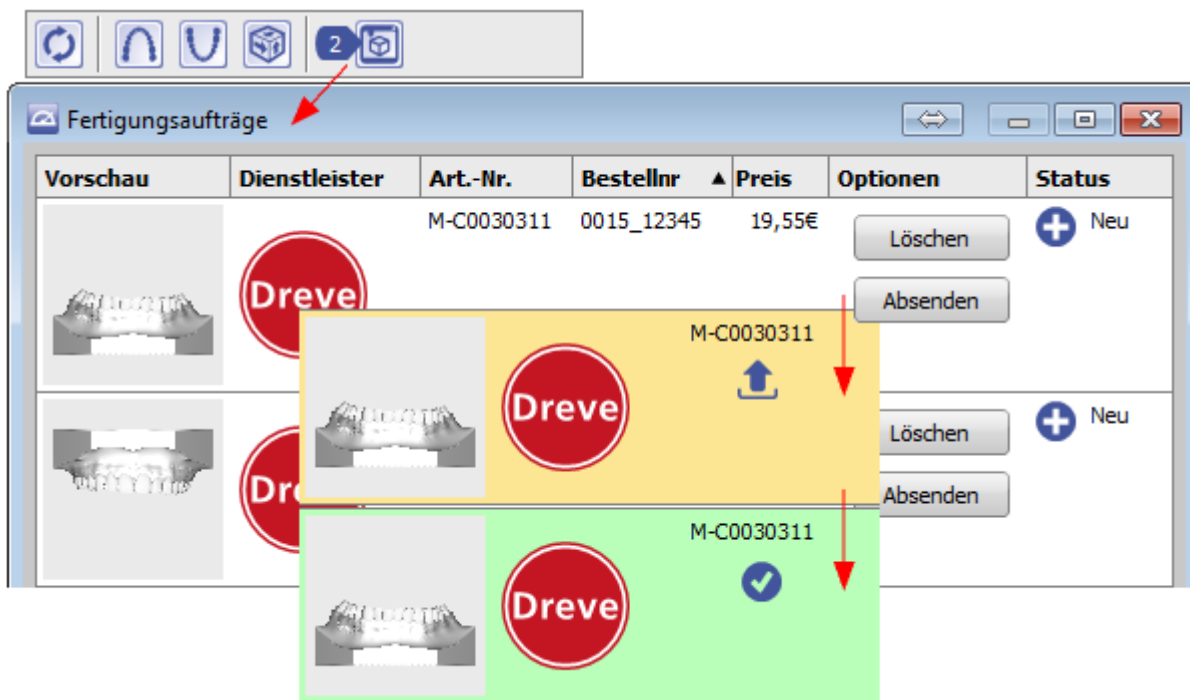

Bestätigung

Nach Eingang des Fertigungsauftrages bei Dreve erhalten Sie eine nochmalige Auftragsbestätigung per Email.

From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=workflow_0022

Last update: **2022/02/07 14:04**

