


# Schnittstellenkonfiguration dentaleypad

## Voraussetzungen

Einrichtung des dentaleypads der Firma [doctorseyes GmbH](#)


## Konfiguration OnyxCeph<sup>3</sup>™

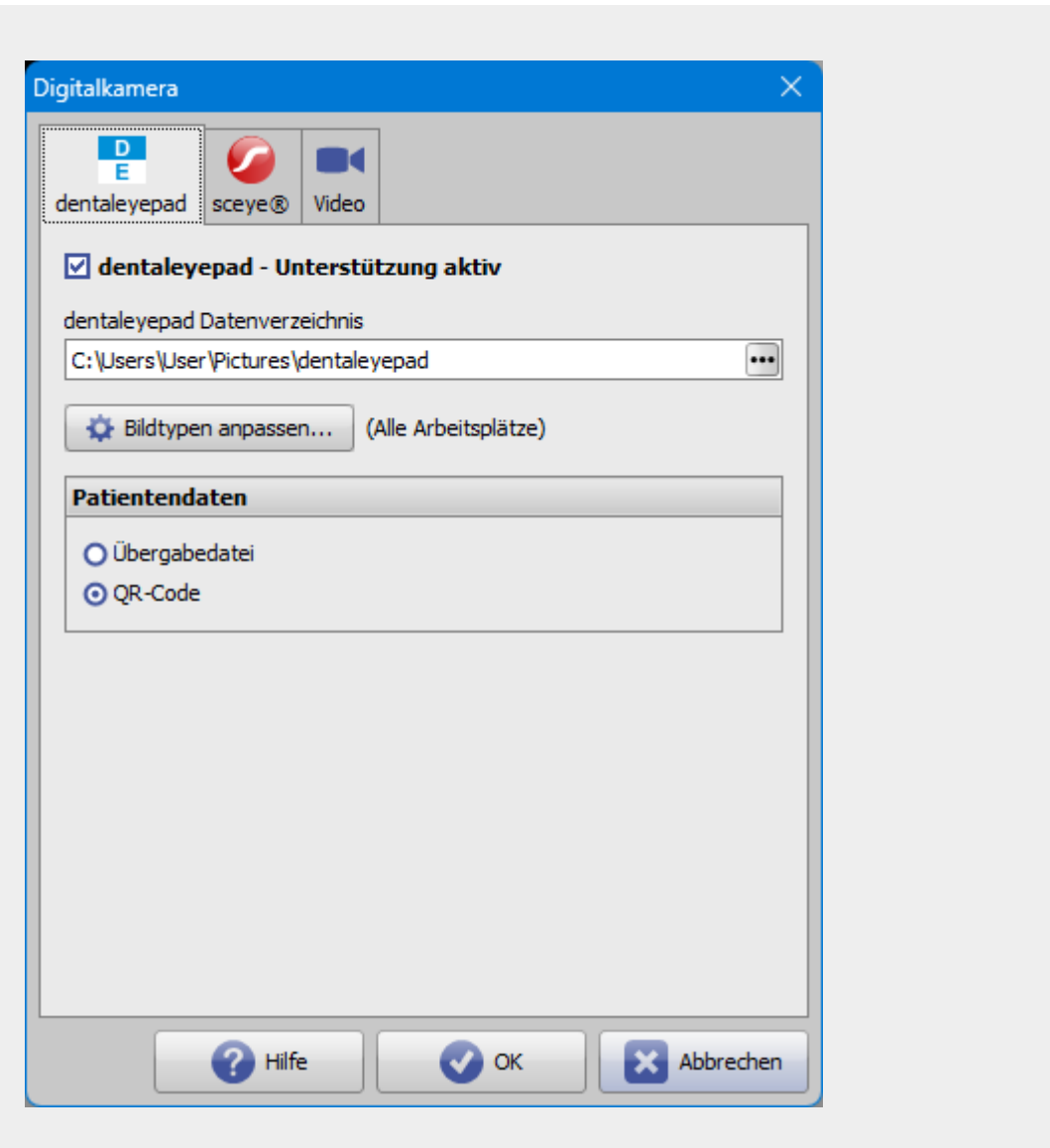

Option	Beschreibung
Unterstützung aktiv	Aktiviert das Import-Tab im Modul <a href="#">Bild hinzufügen 2D</a>
Datenverzeichnis	Verzeichnis für die Bilder des dentaleypad. Muss mit der Einstellung <i>Zielverzeichnis</i> in <a href="#">dentaleypad control server</a> übereinstimmen.
Bildtypen anpassen...	<a href="#">Zuordnung</a> der <a href="#">dentaleypad-Bildarten</a> zu den <a href="#">OnyxCeph<sup>3</sup>™-Bildtypen</a>
Patientendaten	Bestimmt den Modus für die Übergabe des ausgewählten Patienten an das dentaleypad

## Konfiguration dentaleyepad


Verbindungseinstellungen:

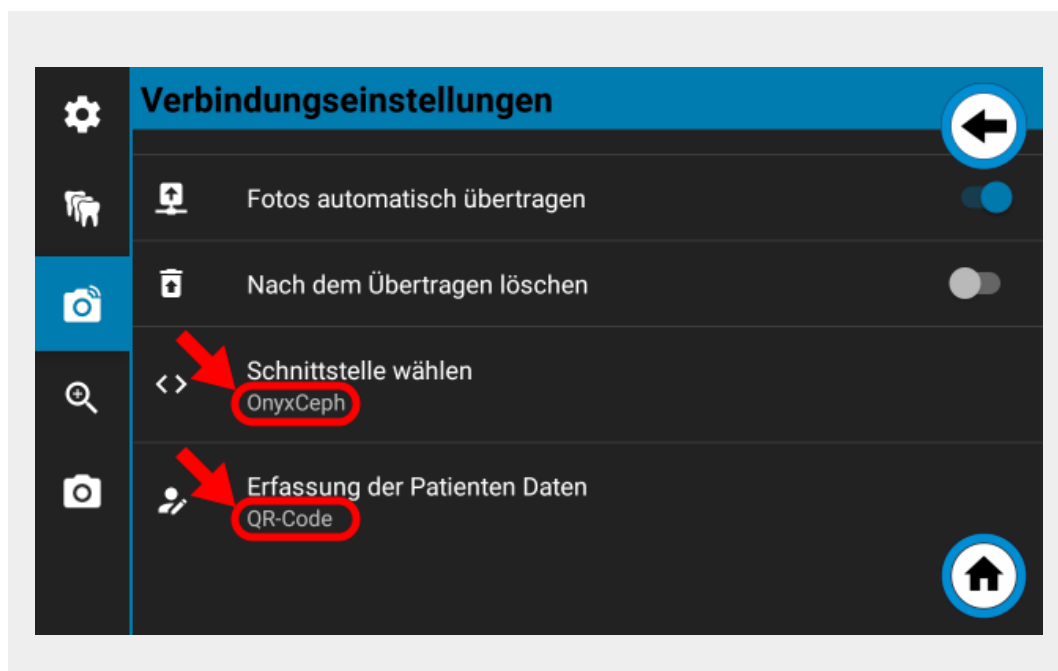

Option	Einstellung
Schnittstelle wählen	OnyxCeph
Erfassung der Patienten Daten	QR-Code (empfohlen)

## Ablauf der Bildaufnahme


1. Patient in OnyxCeph<sup>3</sup>™ auswählen oder anlegen, [2D-Bildimport öffnen](#) und in das Import-Tab *dentaleyepad* wechseln.

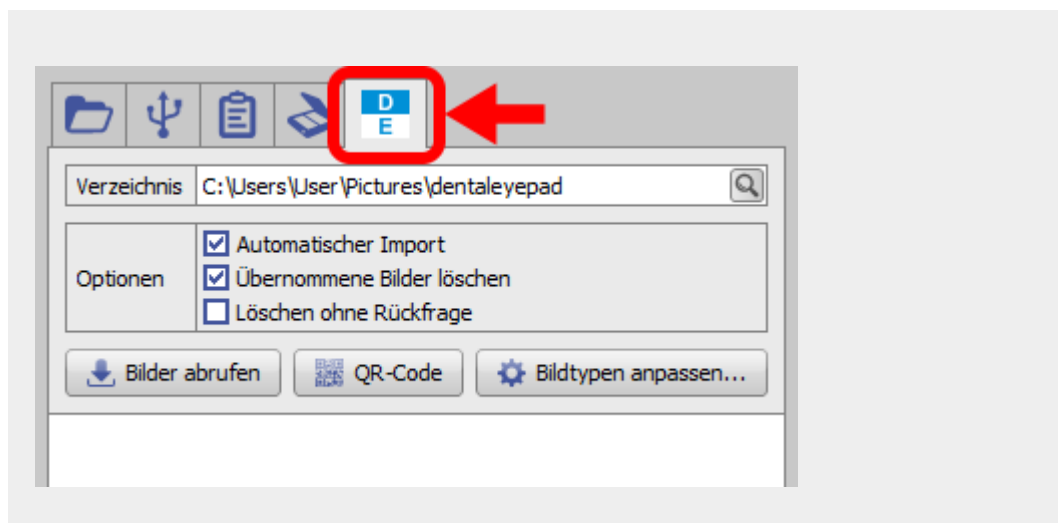


2. dentaleyepad einschalten und/oder in den Kameramodus wechseln.




3. Ausgewählten Patienten dem dentaleyepad bekannt geben.

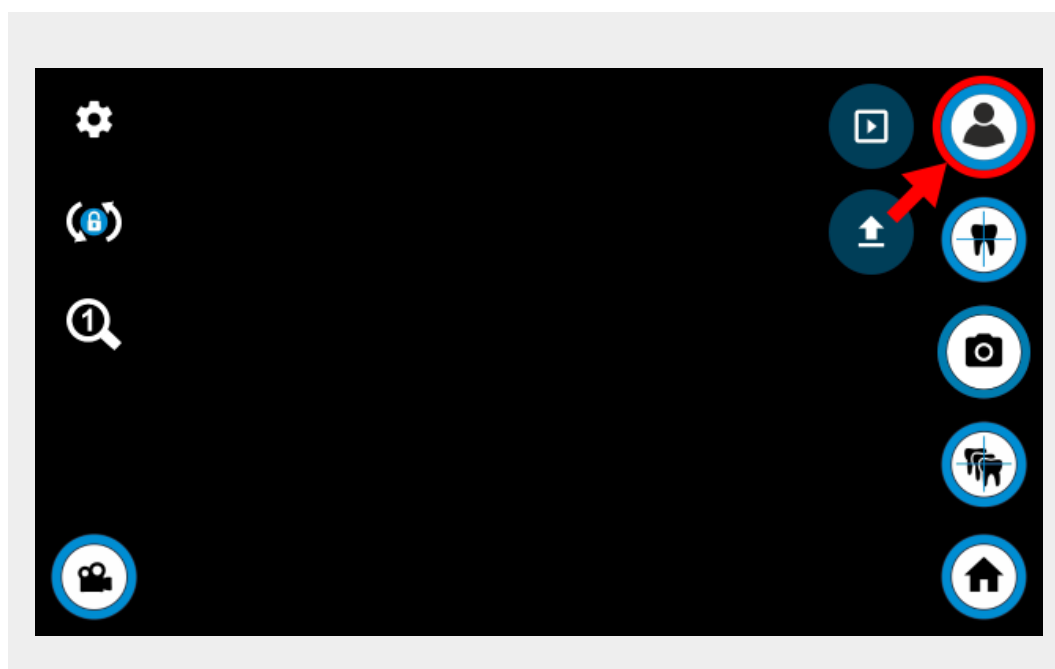


4. QR-Code in OnyxCeph anzeigen und mit dentaleyepad scannen, falls die Erfassung der Patientendaten dementsprechend konfiguriert ist. Andernfalls werden die Patientendaten aus der Info-Datei gelesen, die sich im Bild-Importverzeichnis befindet.




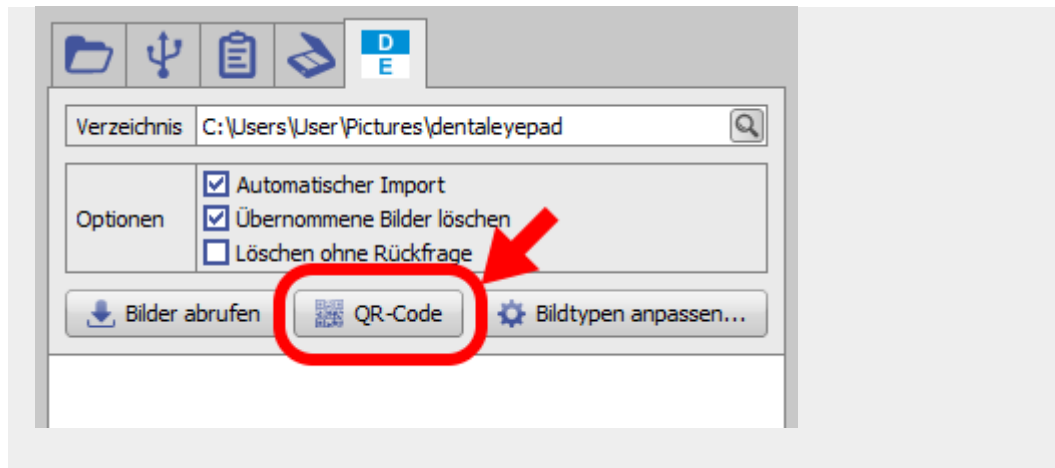


5. ID und Name des Patienten vergleichen.

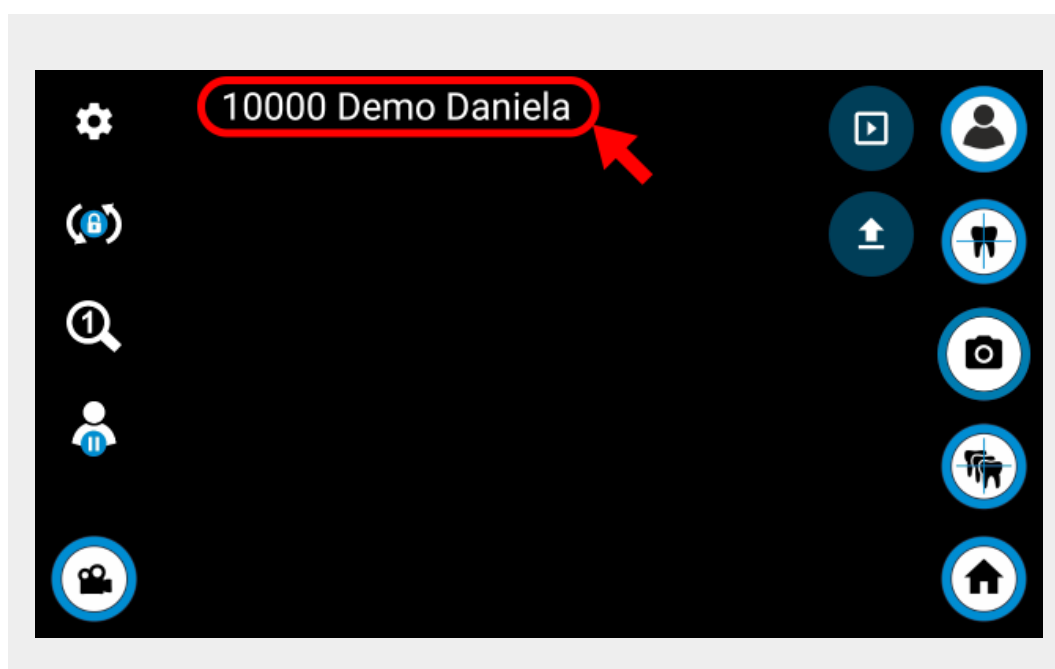


6. Workflow auswählen.

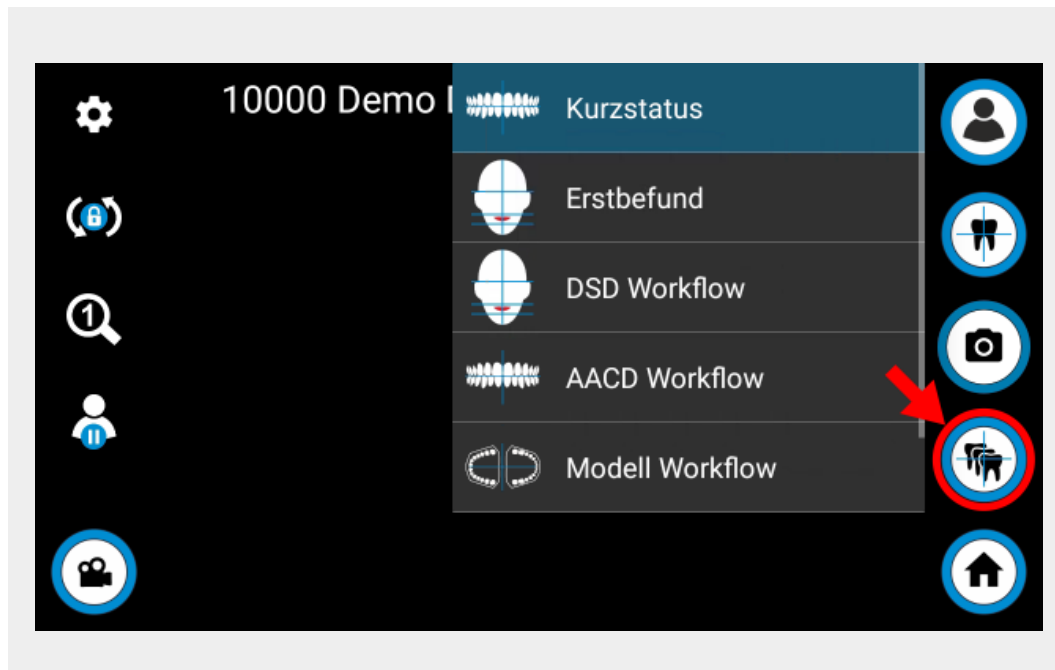

7. Bild aufnehmen.

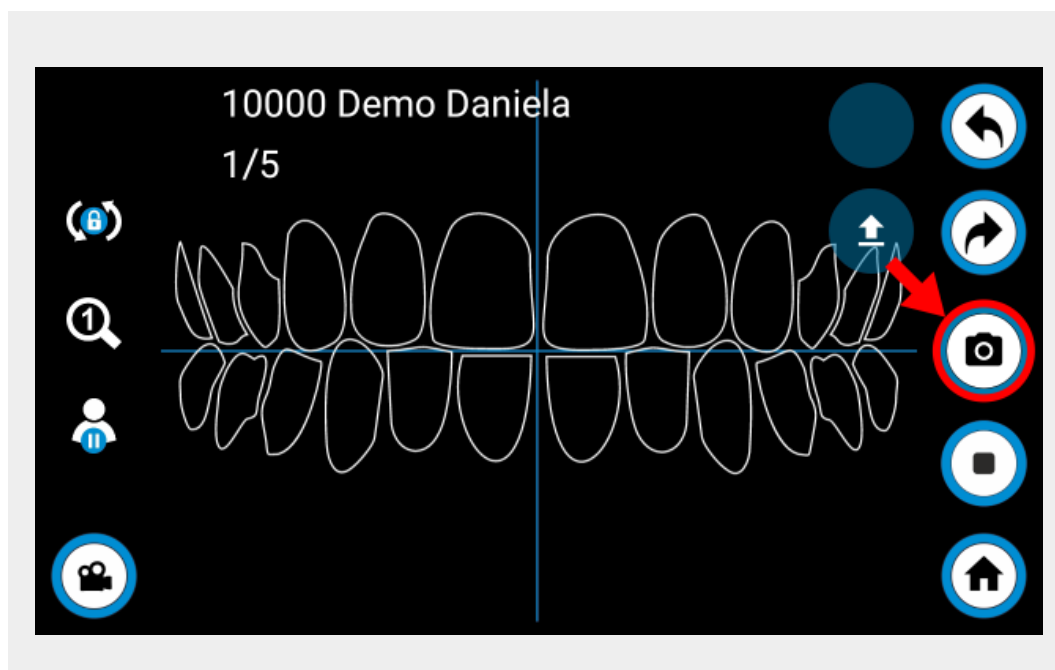

8. Aufnahme bestätigen oder bei Bedarf wiederholen.





#### 9. Bilder in OnyxCeph<sup>3</sup>™ importieren.



Neu aufgenommene Bilder werden automatisch übernommen, wenn die Option **Automatischer Import** gesetzt ist. Andernfalls müssen die Bilder per Drag&Drop aus der Quellenliste übernommen werden. Die Quellenliste kann über die Taste **Bilder abrufen** aktualisiert werden.

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=dentaleyepad&rev=1690296556>

Last update: **2023/07/25 16:49**

