


# Interface Configuration Digital Xray: Carestream

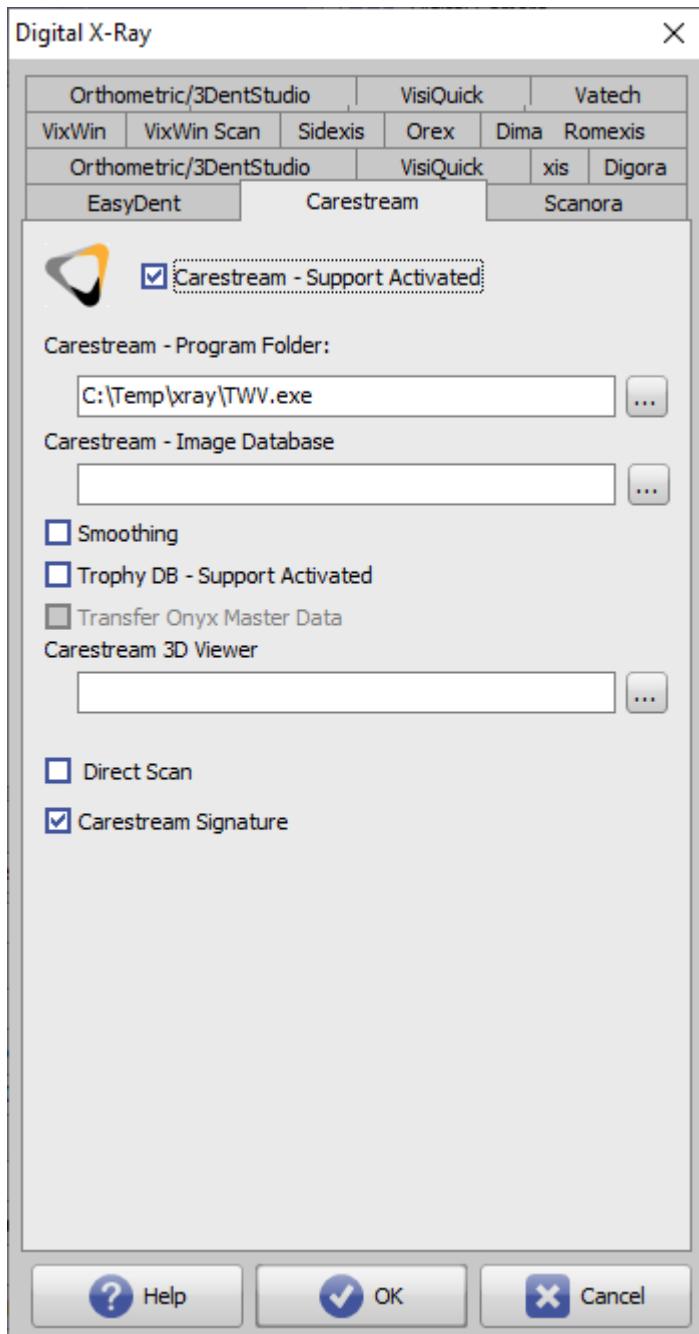

Parameter	Setting
[Support Activated]	Activates import icon button in module Add Image 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\TWV.exe
Bildübergabepfad [...]	Pfad der Carestream-Bilddatenbank
[Glättung]	Verbesserung der Anzeige hochauflöster Bilder durch Resampling
[Trophy DB]	vorhanden DB der Software nutzen
[Onyx - Stammdaten übergeben]	Stammdaten bei Aufruf übergeben
Carestream 3D Bildbetrachter [...]	Pfad zum internen 3D Betrachter
[Carestream Signature]	interne Benennung der Bildablage verwenden

## Links

 [Import Carestream Landmarks](#)

From:  
<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3™</sup> Wiki]

Permanent link:  
<https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=en:carestream>

Last update: **2022/07/07 13:19**

