


Interface Configuration Digital Xray: Orex

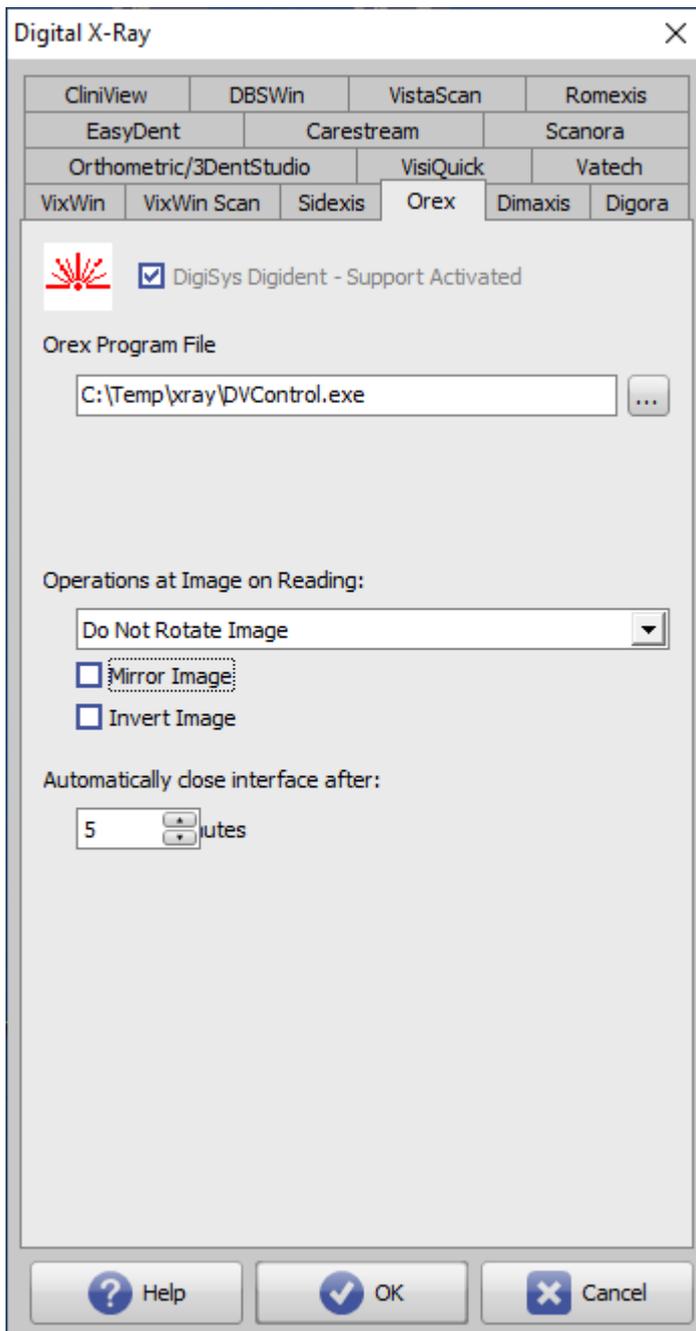

Parameter	Setting
[Support Activated]	Activates import icon button in module Add Image 2D
Programmdatei [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\DVControl.exe
[Operationen am Bild ...]	Bild bei Übergabe rotieren
[Bei Übergabe vertikal spiegeln]	Bild bei Übergabe vertikal spiegeln
[Bei Übergabe invertieren]	Bild bei Übergabe invertieren
[Interface automatisch schließen ...]	Interface nach 1...10 min automatisch schließen

From:
<https://onyxwiki.net/> - **[OnyxCeph³™ Wiki]**

Permanent link:
<https://onyxwiki.net/doku.php?id=en:orex>

Last update: **2022/06/27 07:38**

