


# Interface Configuration Digital Xray: Scanora

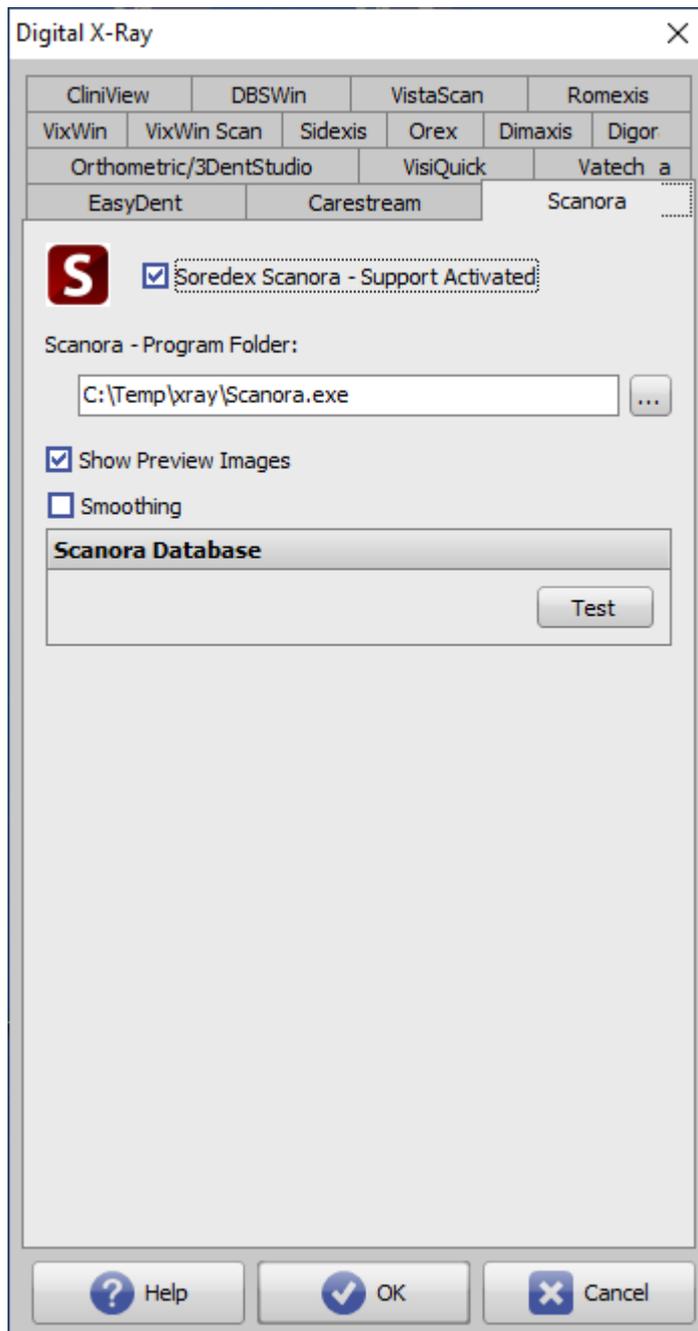

Parameter	Setting
[Support Activated]	Activates import icon button in module <a href="#">Add Image 2D</a>
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\Scanora.exe
[Vorschaubilder anzeigen]	Aktivierung Thumbnail-Vorschau im Vorschaufenster Modul Bild hinzufügen 2D
[Glättung]	Verbesserung der Anzeige hochauflöster Bilder durch Resampling
[Test]	Test Datenbankzugriff

From:  
<https://onyxwiki.net/> - **[OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]**

Permanent link:  
<https://onyxwiki.net/doku.php?id=en:scanora>

Last update: **2022/06/27 07:35**

