

Modul Kylix 3D




Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗	✗			

Modul Kylix 3D erlaubt die Konstruktion von Bracketadaptern unterschiedlichen Designs auf den zugehörigen virtuellen Kronen, um die z.B. in Modul [FA_Bonding](#) oder [Wire_Bonding](#) virtuell geplante Bracketpositionen mit Hilfe von konventionellen Tiefziehschienen, die über dem gefertigten Modell gefertigt werden, zu übertragen.

Erste Schritte

- 1. Form und Dicke für Kylix (Fassung) festlegen und erzeugen
- 2. Form und Dicke für Basis (Auflage) festlegen und erzeugen
- 3. Als neuen Befund speichern oder direkt über Objektliste 3D exportieren

Moduloberfläche

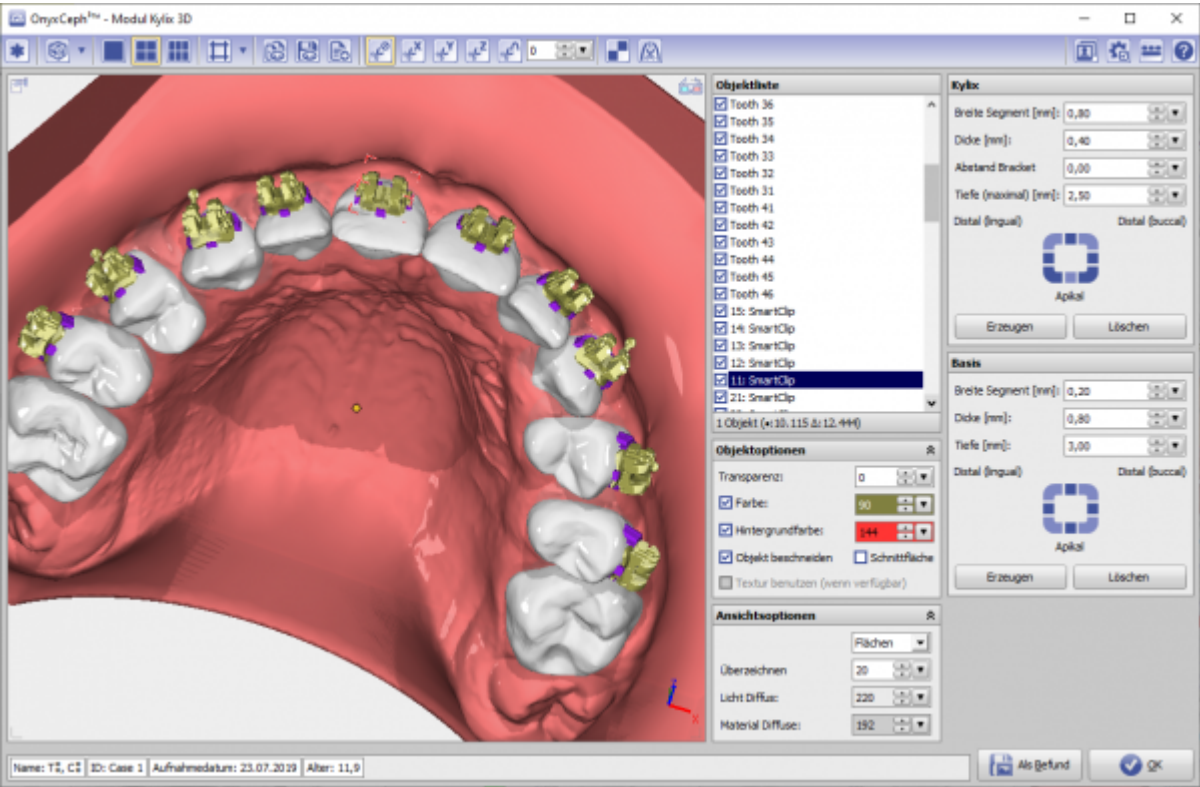

Verweise

 <https://youtu.be/ohejvs3cu28>

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=kylix_3d&rev=1590434210

Last update: **2020/05/25 21:16**

