

# Modul Kombinieren | Register 3D



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗	✗	🏠	🏠	🏠

✗

enthalten

nicht

🏠

enthalten

immer

🏠

enthalten


optional

Modul Kombinieren 3D erlaubt in den beiden separat anwendbaren Modi [Kombinieren] und [Registrieren] die Fusion von zwei 3D-Befunde anhand überlappender Merkmale, um anhand der Kombination zusätzliche Möglichkeiten für Visualisierung, Diagnostik oder Planung zu eröffnen.

## Erste Schritte

1. Modul mit 2 Befunden öffnen
2. Korrespondierende Referenzpunkte setzen
3. Für ICP-Registrierung, Oberflächenbereich markieren
4. Auf Reiter |Kombination| wechseln und Ergebnis konfigurieren
5. Ergebnis als Befund speichern

## Moduloberfläche

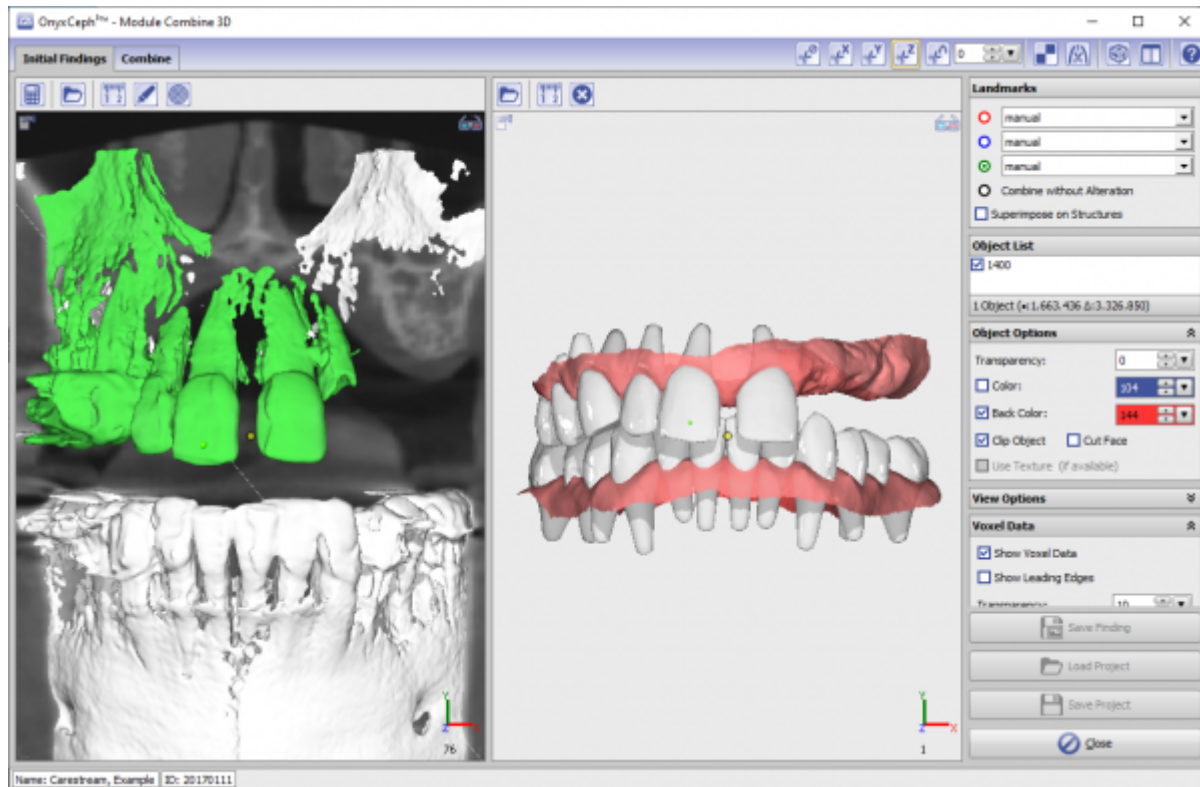

## Verweise

[Combine 3D](#)[Panel Oberflächenregistrierung 3D](#)

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

[https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=combine\\_3d&rev=1710421179](https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=combine_3d&rev=1710421179)

Last update: **2024/03/14 13:59**

