


Datensatz in Originalgröße darstellen

Frage:

Wie kann ein 3D Datensatz am Monitor in Originalgröße angezeigt werden?

Antwort:

Rechtsklick auf die Mittelposition des rechten Zoom-Sliders in jedem 3D-View:

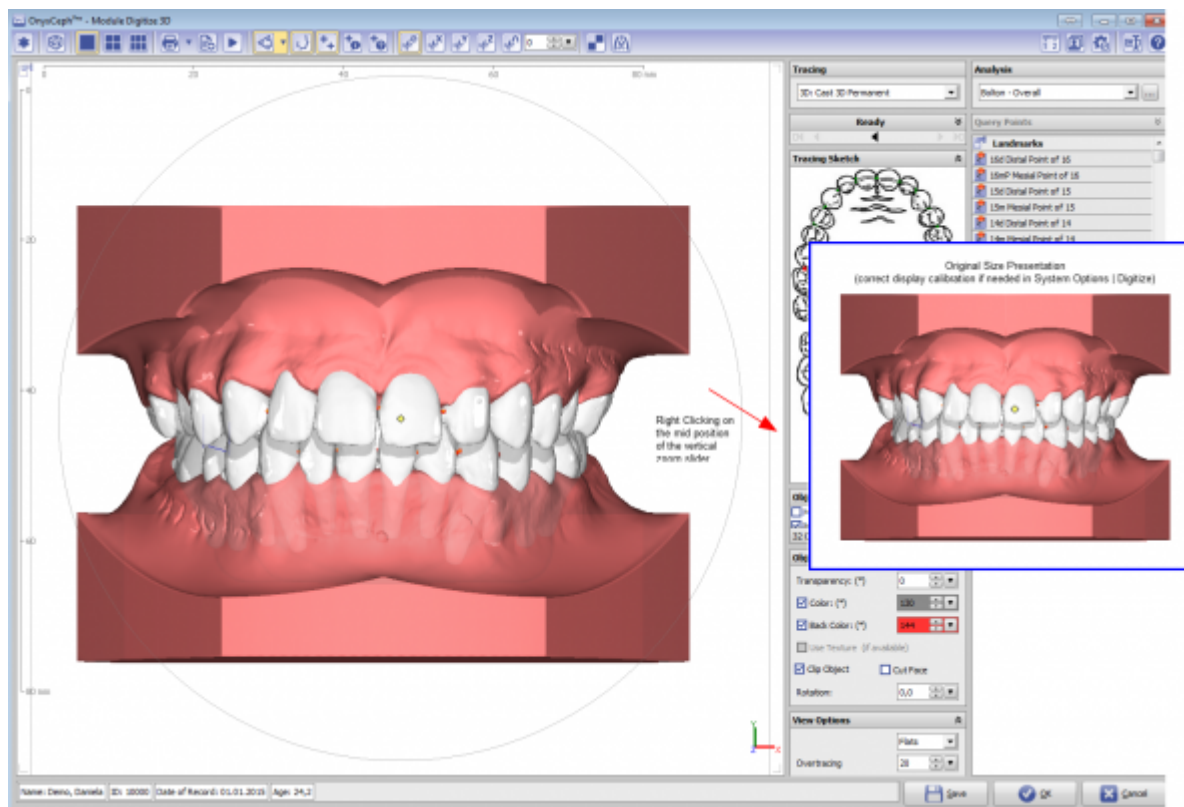

Fehlerhafte Kalibrierung des Monitors kann über Menü Optionen|Systemoptionen auf Reiter |Auswertung| angepasst werden.

From:

<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

<https://onyxwiki.net/doku.php?id=faq10010>

Last update: **2018/03/23 16:15**

