


Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: VisiQuick

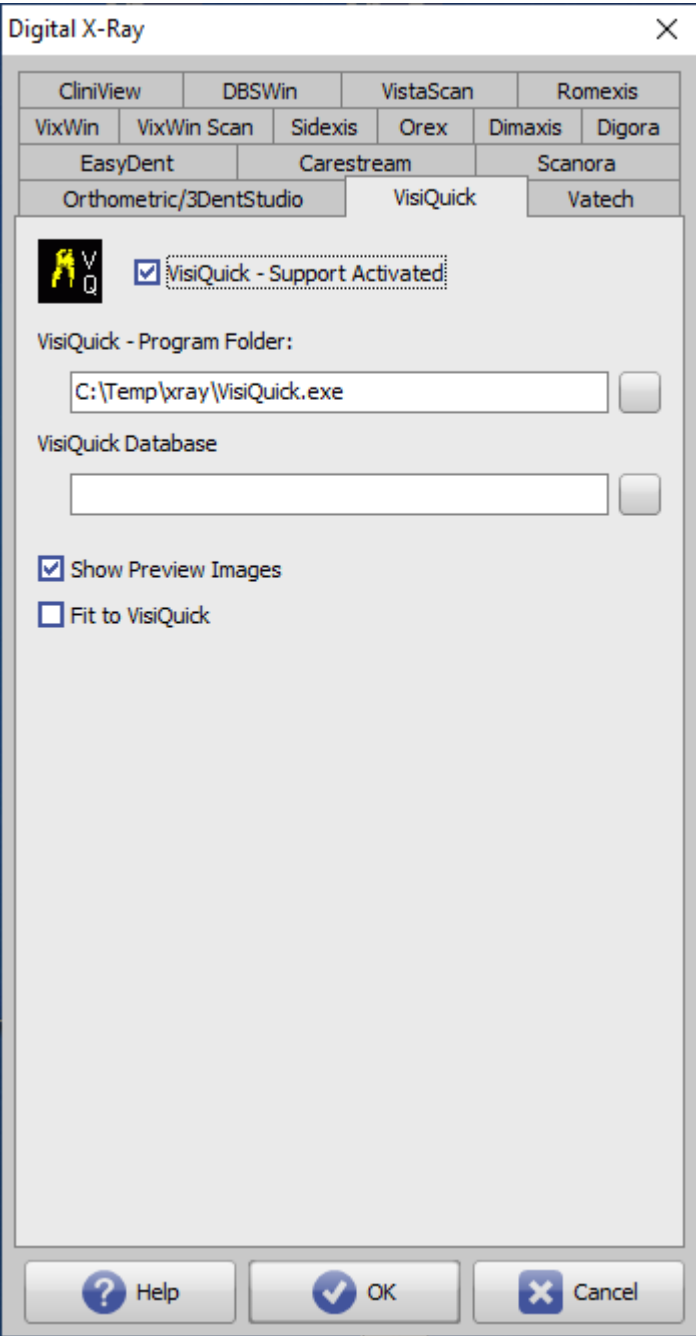

Parameter	Einstellung
[Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul Bild hinzufügen 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\VisiQuick.exe
Datenbank [...]	Pfad zur VisiQuick Datenbank
[Vorschaubilder anzeigen]	Aktivierung Thumbnail-Vorschau im Vorschaufenster Modul Bild hinzufügen 2D
[An VisiQuick anpassen]	übergebene ID an intern vergebene anpassen

From:

<https://onyxwiki.net/> - **[OnyxCeph³™ Wiki]**

Permanent link:

<https://onyxwiki.net/doku.php?id=visiquick>

Last update: **2022/06/27 07:36**

